

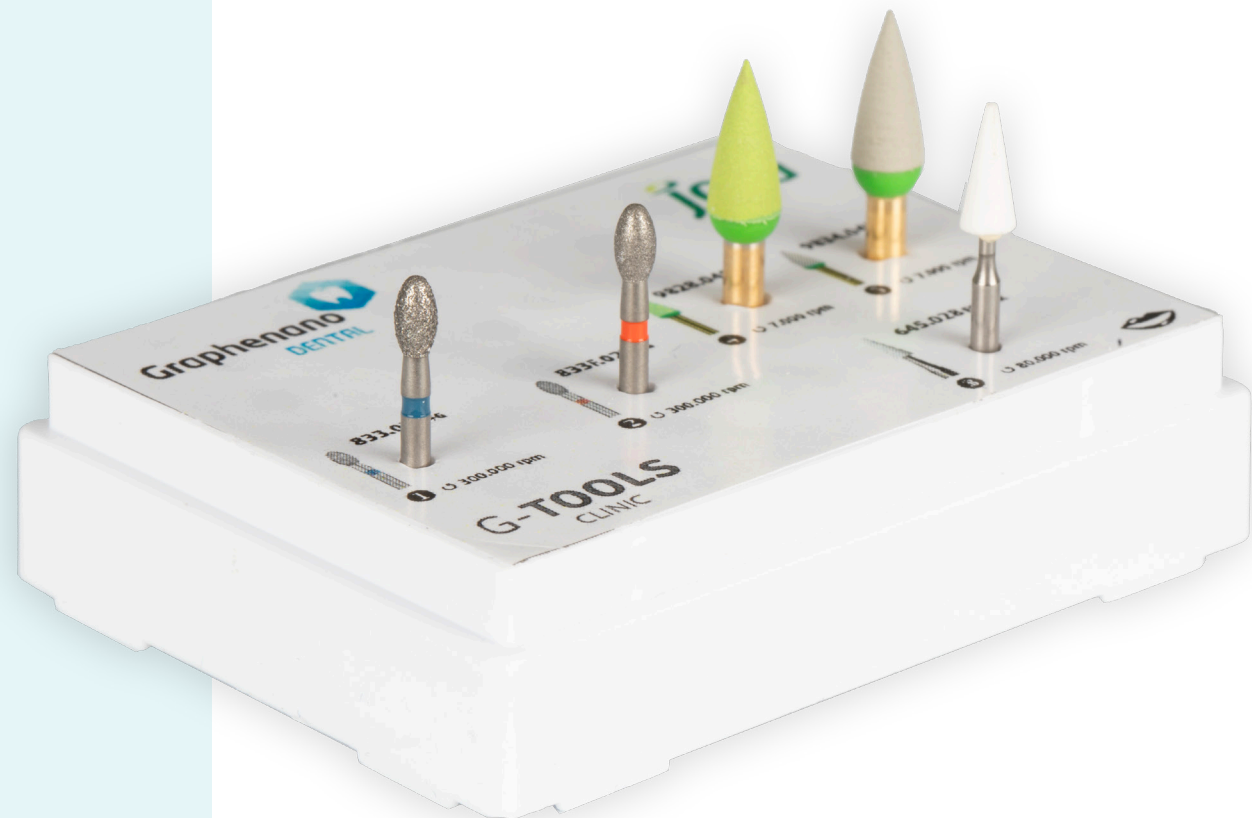


G-TOOLS CLINIC

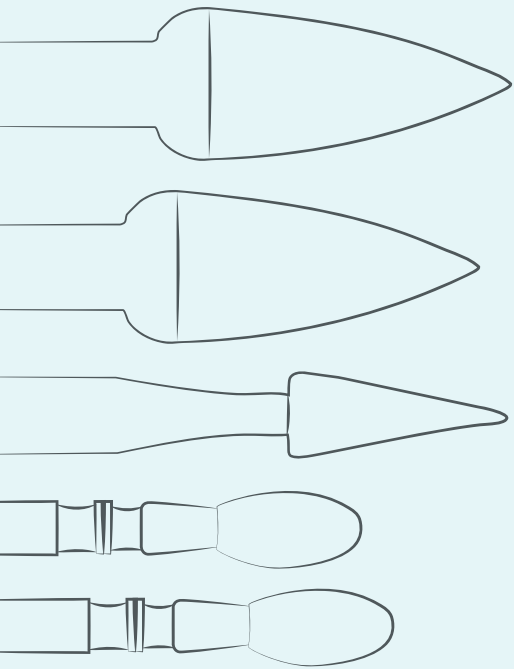

**Kit de pulido
en clínica**

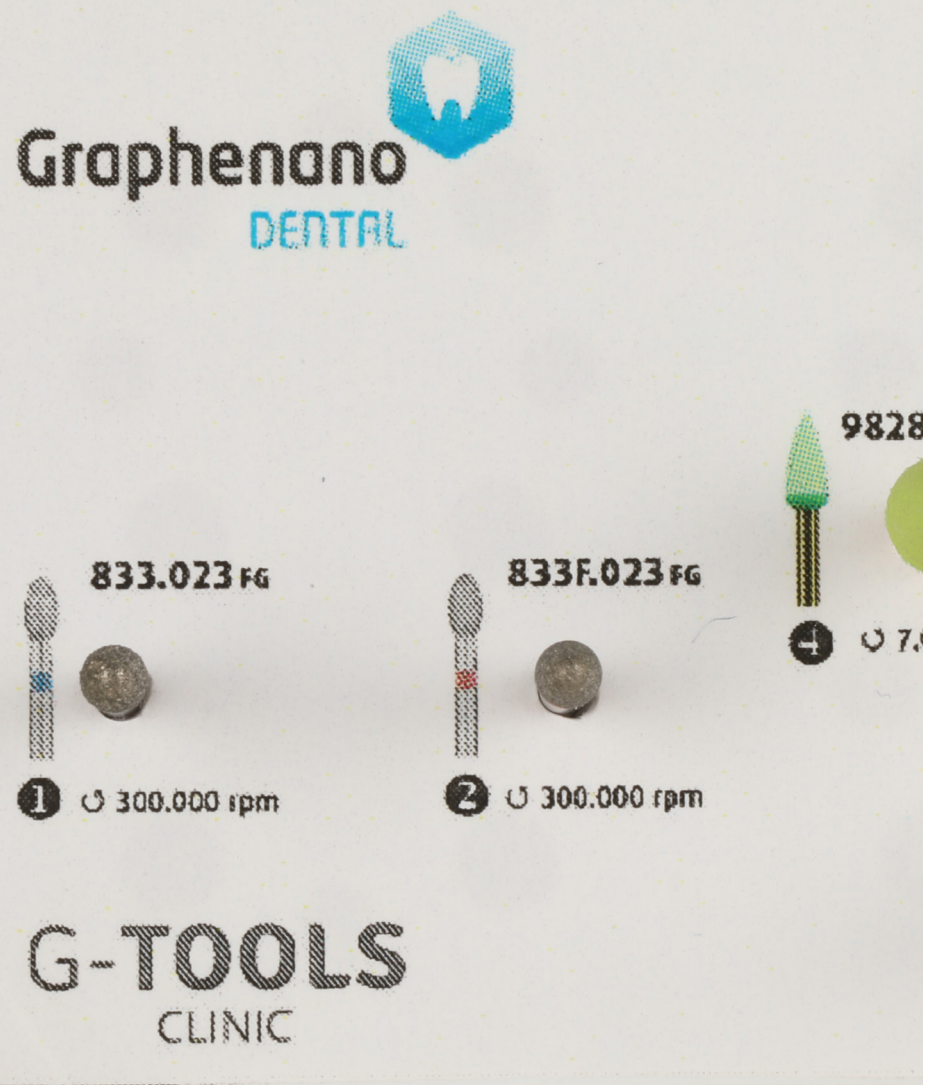

Kit de pulido en clínica

El kit de pulido G-CAM para clínica con el que puedes ajustar de forma segura y precisa la prótesis dental una vez cementada.

Cuenta con cuatro pasos: preparación, retoque oclusal, pulido y brillo.

Kit de pulido en Clínica

Arkansas
645.FG.028.ARK



rpm: 300.000
635314161505028

Diamante medio
833.FG.023



rpm: 300.000
806314277524023

Diamante fino
833F.FG.023



rpm: 300.000
806314277524023

Pulidor
diamantado medio
9828.RA.040



rpm: 7.000 - 10.000
803204243525040

Pulidor
diamantado fino
9834.RA.040



rpm: 7.000 - 10.000
803204243525040



Paso 1: Preparación

Cod ref. 645.FG.028.ARK

Características:

Fresa de tipo abrasivo de grano estándar en forma de lanza.

Uso:

Antes de la cementación de la prótesis al diente natural, realizaremos una última pasada al esmalte con la fresa de Arkansas. Nos va a ayudar a mejorar la adhesión ya que deja la superficie porosa.

Longitud:

7 mm

Revolución recomendada:

300.000 rpm



**Cod ref. 833.FG.023**

Sirve para el ajuste de la oclusión una vez cementada la prótesis en boca del paciente.

Este paso consta de dos fases:

La primera fase utilizaremos la fresa de diamante grano medio (anillo azul) para ajustar la oclusión del paciente.

Características:

Fresa Diamante con forma de llama o huevo con punta redondeada.

Uso:

Reducción de la superficie oclusal del Grafeno, facilitando a su vez la forma anatómica.


Longitud:

Parte activa de 4.2 mm

Revolución recomendada:

300.000 rpm



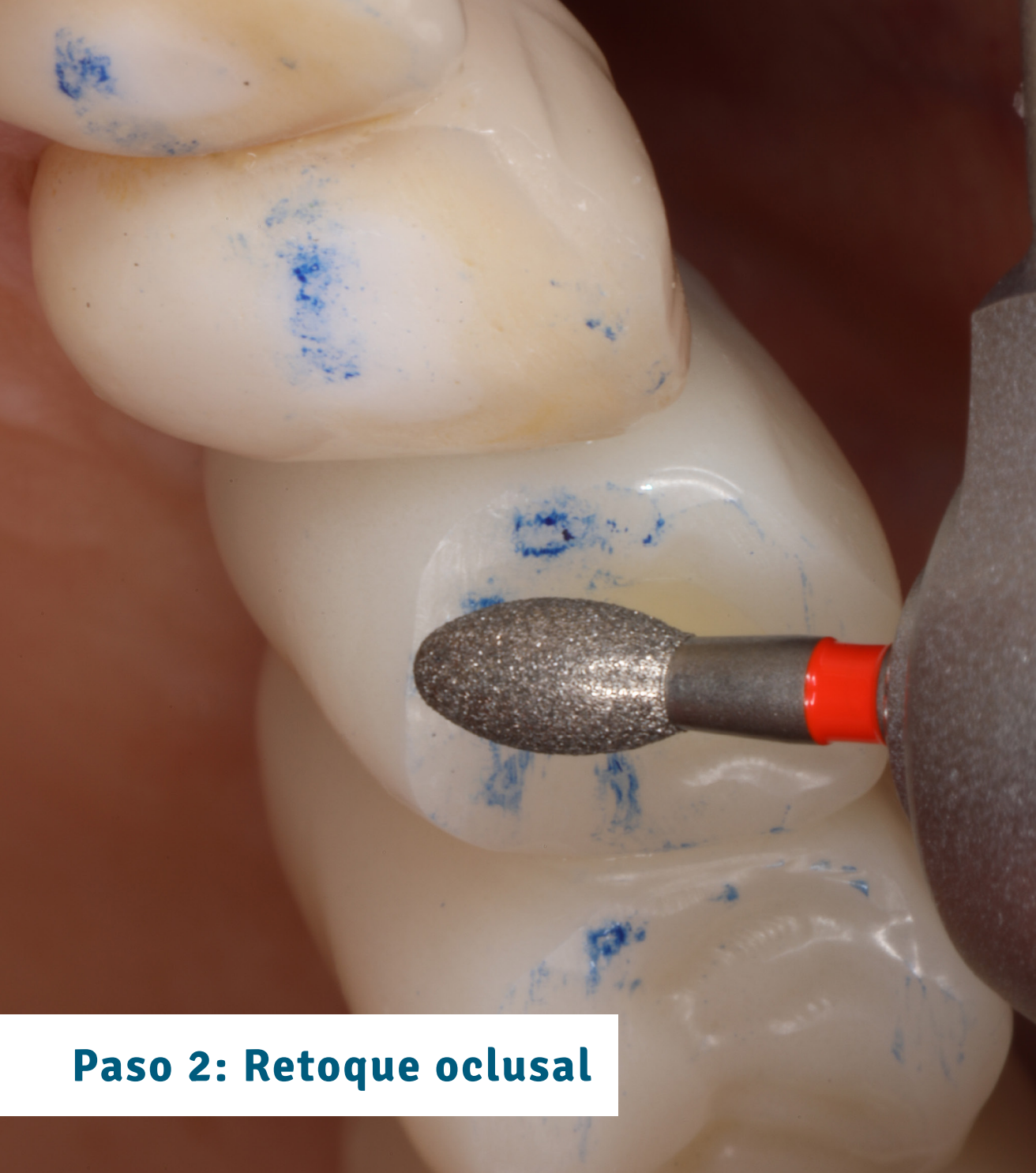

Paso 2: Retoque oclusal

Cod ref. 833F.FG.023

En la segunda fase utilizaremos la fresa de diamante grano fino (anillo rojo) para suavizar la superficie retocada.

Características:

Fresa Diamante con forma de llama o huevo con punta redondeada.

Uso:

Suavizar la superficie oclusal retocada en la primera fase, manteniendo la forma anatómica anterior.


Longitud:

Parte activa de 4.2 mm

Revolución recomendada:

300.000 rpm



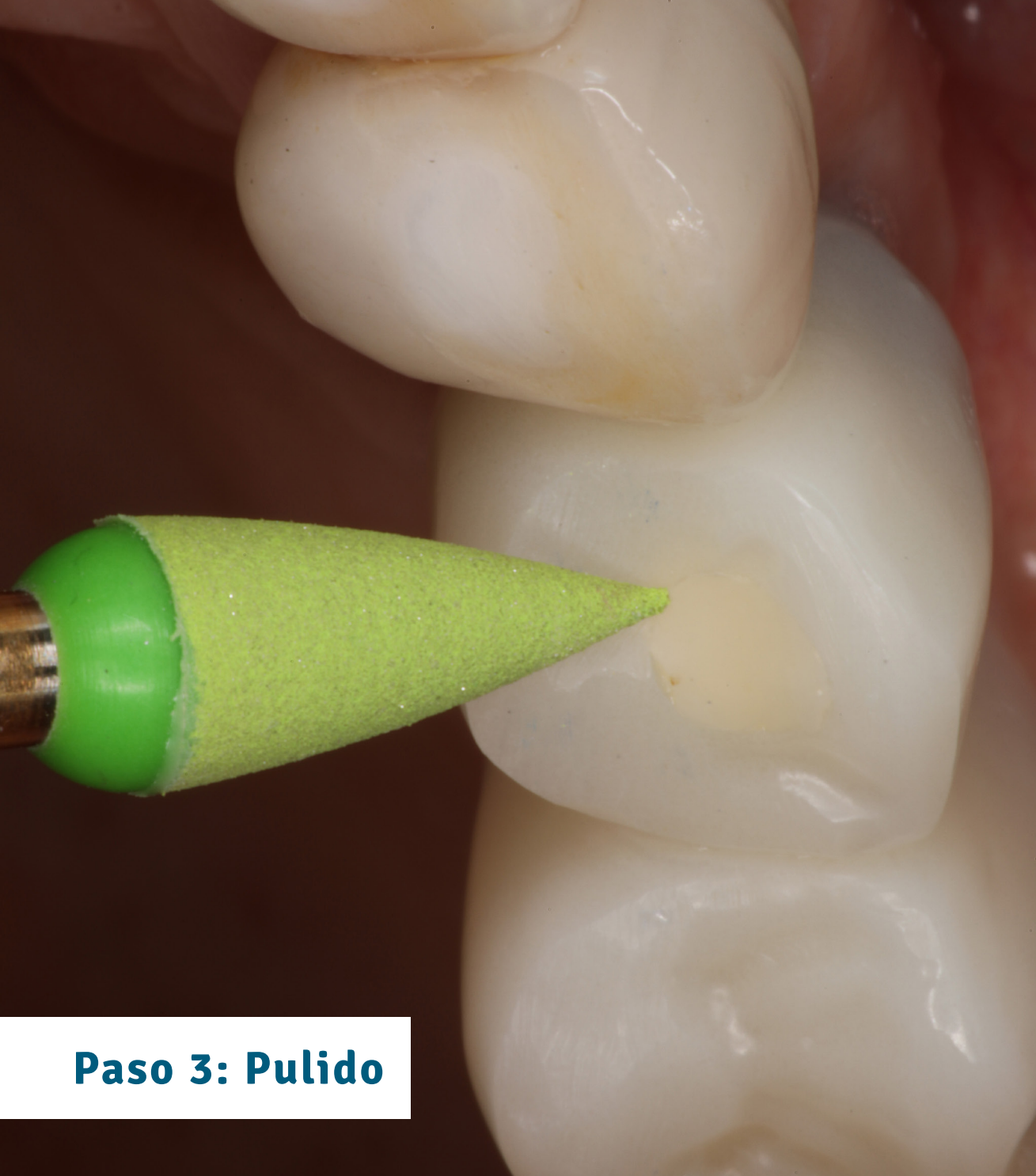

Paso 3: Pulido

Cod ref. 9828.RA.040

Características:

Pulidor diamantado en forma de bala de Grano medio de alto rendimiento (color verde).

Uso:

Sirve para el alisado de la prótesis sellando la superficie de la misma.

Longitud:

Parte activa de 10 mm

Revolución recomendada:

7.000 - 10.000 rpm presión fuerte





Paso 4: Brillo

Cod ref. 9834.RA.040

Características:

Pulidor diamantado en forma de bala de Grano fino de alto rendimiento (color gris).

Uso:

Para el acabado y alto brillo de la prótesis.

Longitud:

Parte activa de 10 mm

Revolución recomendada:

3.000 - 8.000 rpm presión fuerte



G-TOOLS

 **Graphenano Dental**


info@graphenanodental.com

Polígono Industrial Táctica. Calle 2, n.º 1

46980 Paterna, Valencia (Spain)

t. (+34) 965 108 102

graphenanodental.com

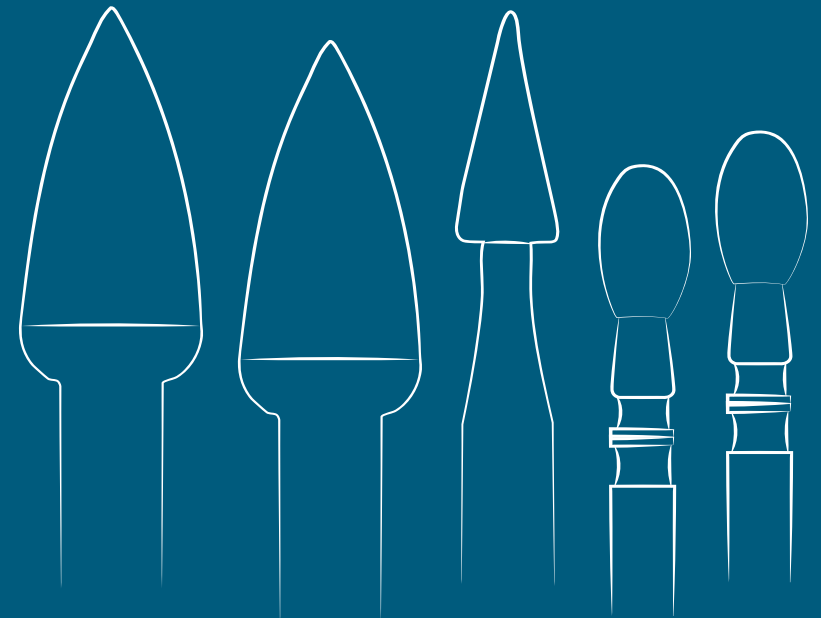

Graphenano
DENTAL

jota
SWITZERLAND