



Coronas

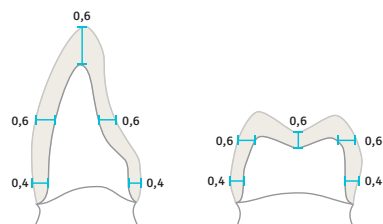

Carillas

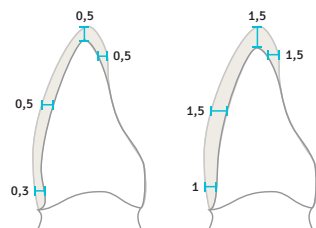

Diente sano

Diente manchado

Implantes sumergidos




Seleccionar la altura gingival correcta, para elevar la conexión del implante lo más a ras posible de la encía.

Ventajas:


- Asegurar el grosor mínimo establecido.
- Evitar la descementación.

Dimensión vertical

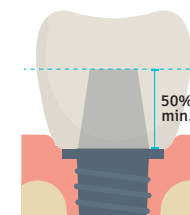


La interfase debe cubrir como mínimo el 50% de la altura total de la estructura de G-Cam, asegurando la estabilidad de la estructura y evitando la descementación.

Espesores alrededor del aditamento

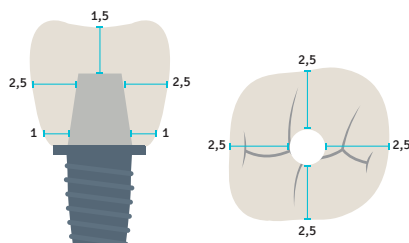


Conectores transversales

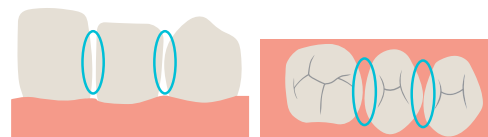

Min. 9 mm²
Zona anterior.

Min. 13 mm²
Zona posterior.


Pónico

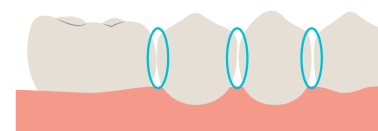

Dientes naturales: Máximo 2 pónicos en zona anterior y posterior.


Implantes: Máximo 3 pónicos zona anterior y 2 pónicos zona posterior.

Cantilever Tratamiento Provisional

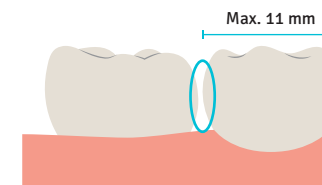


Mín. 13 mm² y no realizar individualizaciones de la estructura a nivel lingual o palatino.

Incrustaciones

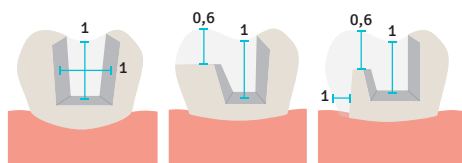


Tallados paralelos y márgenes definidos

Estrategia de fresado

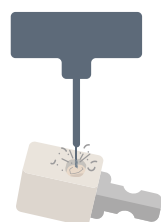

PMMA / COMPOSITE
seco/húmedo

Acabado

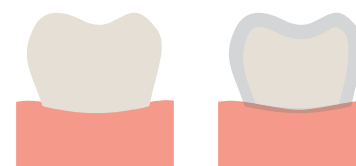

Monolítico

Revestible

G-BLOCK

Bloque de biopolímero reforzado con grafeno para fresado CAD/CAM



Made in Spain

